

dretec

メロディー付音波式電動歯ブラシ

TB-311

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全
にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL：http://www.dretec.co.jp
お客様相談センター
☎0120-875-019
(受付時間：月～金 10:00～12:00、13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合
 - ※ 字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体
保証条件：持込修理
保証期間：お買い上げ日より1年以内
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

保 証 書	お買い上げ年月日
	お買い上げ店
	お名前
	ご住所
	お電話番号

安全上のご注意

⚠ 警告	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
------	--


- 下記の方は使用しない。または歯科医師に相談する。
 - 口内の感覚が敏感な方／口腔または歯周手術の直後や治療中の方／口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方／歯ぐきから出血が続く、または大量の出血がある方
 - ・傷口を悪化させたり、けがの原因になります。
- 本体・ブラシ・電池は、乳幼児の手の届くところに置かない。
 - ・乳幼児のけがの原因になります。
- 複数の人で併用しない。
 - ・病原菌が感染する原因になります。
- あおむけやそれに近い姿勢で使用しない。
 - ・ブラシがはずれた場合、のどにつまるおそれがあります。
- 分解や改造をしない。
 - ・けがや故障の原因になります。
- 浴室内など水のかかる場所で使用しない。
 - ・故障の原因になります。

⚠ 注意	この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。
------	--

- 自分で意思表示ができない方は使用しない。
- 小さなお子さまが使用する場合は、誤った使い方をしないように保護者が使い方などを指導し、正しく使用できているか確認する。
- 体の不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必ずまわりの方が気をつける。
- 歯や歯ぐきにブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分を当てない。また、長時間同じ箇所を磨かない。
 - ・歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。
- ご使用中に体調が悪くなった場合は、使用を中止する。
また、違和感を感じる場合は、歯科医に相談の上、使用する。
- 本体を踏む、落とす、ぶつける、噛むなどの強い衝撃を与えない。
 - ・けがや故障の原因になります。
- 人以外に使用しない。また、歯や歯ぐきのブラッシング以外には、使用しない。
 - ・事故やトラブルの原因になります。
- 電源を入れたまま放置しない。
 - ・漏液、発熱、破裂などを起こし、本体が破損する原因になります。
- ブラシが本体にしっかり固定されていない状態で、使用しない。
 - ・事故や故障の原因になります。
- ブラシを口に入れたまま手を離さない。
 - ・ブラシ部がはずれる場合があります。
- スイッチ部、電池カバーを水に浸けたり、流水に当てたりしない。
 - ・防水仕様ではないため、故障の原因になります。
- 音波振動で使用するときは口に入れる前にスイッチをONにしない。
また口から出す前にスイッチをOFFにする。
 - ・ハミガキ剤、水が飛び散る場合があります。
- 研磨剤が多く含まれるハミガキ剤(やに取り用・美白用など)は使用しない。
 - ・歯や歯ぐきを痛める原因になります。
- 電池カバーと本体(電池セット部)にあるゴムパッキンをはずしたり、傷つけない。
 - ・内部に水が入り、故障の原因になります。

各部の名称

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

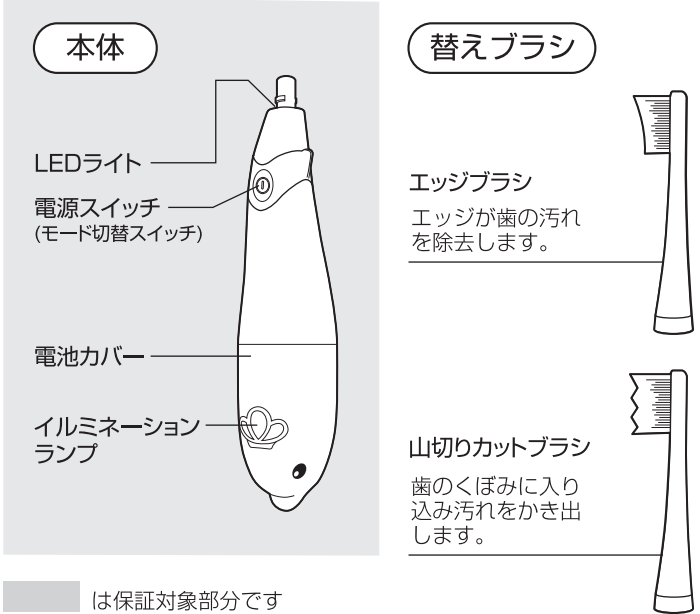

ブラシの交換

○ブラシのはずし方

- ① ブラシを矢印の方向に回してください。
- ② ブラシを矢印の方向に引き抜いてください。

○ブラシの取り付け方


- ① ブラシの凹部と本体の凸部を図のように合わせて差し込みます。
- ② ブラシを矢印の方向に回して固定します。

電池の入れ方

※ニッケル水素充電電池は使用できません。

1 本体を手でしっかりと握り、下図のように電池カバーを取りはずします

- ① マークが電池カバー取付位置にくるまで回します。
- ② 電池カバーを引き抜いて取りはずします。

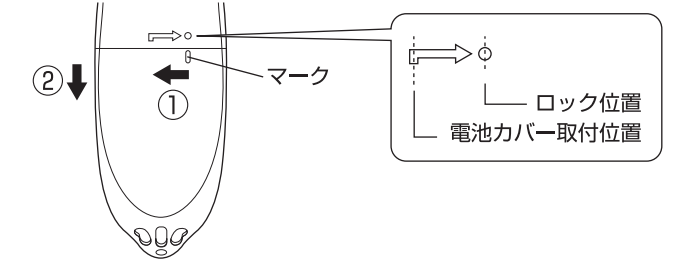

2 電池を入れます

- ① プラスドライバーでネジを回し、電池固定カバーを取りはずします。
※はずしたネジは無くさないようにご注意ください。
- ② 単4形アルカリ乾電池の極性(＋・－)を間違えないように入れてください。

3 電池固定カバーを取り付けます

- ① 電池固定カバーを取り付け、プラスドライバーでネジを回し、電池を固定します。

4 電池カバーを本体に取り付けます

本体側と電池カバーのゴムパッキンがはずれていないことを確認してください。

- ① マークと電池カバー取付位置を合わせて差し込みます。
- ② ロック位置まで回します。

使用方法

1 口の中にブラシを入れる


- ⚠ 注意

本体の動きに任せて歯を磨いてください。力を入れて押したり、こすったりすると、故障の原因になります。
- ※ハミガキ剤は適量をつけてください。


2 電源スイッチを押す

電源スイッチを押すごとに、LEDライトの点灯、メロディーを切り替えることができます。
(裏面 - 図1 参照)

図 1 .
電源スイッチを押すごとに以下の順で動作が切り替わります。お好みの動作でご使用ください。

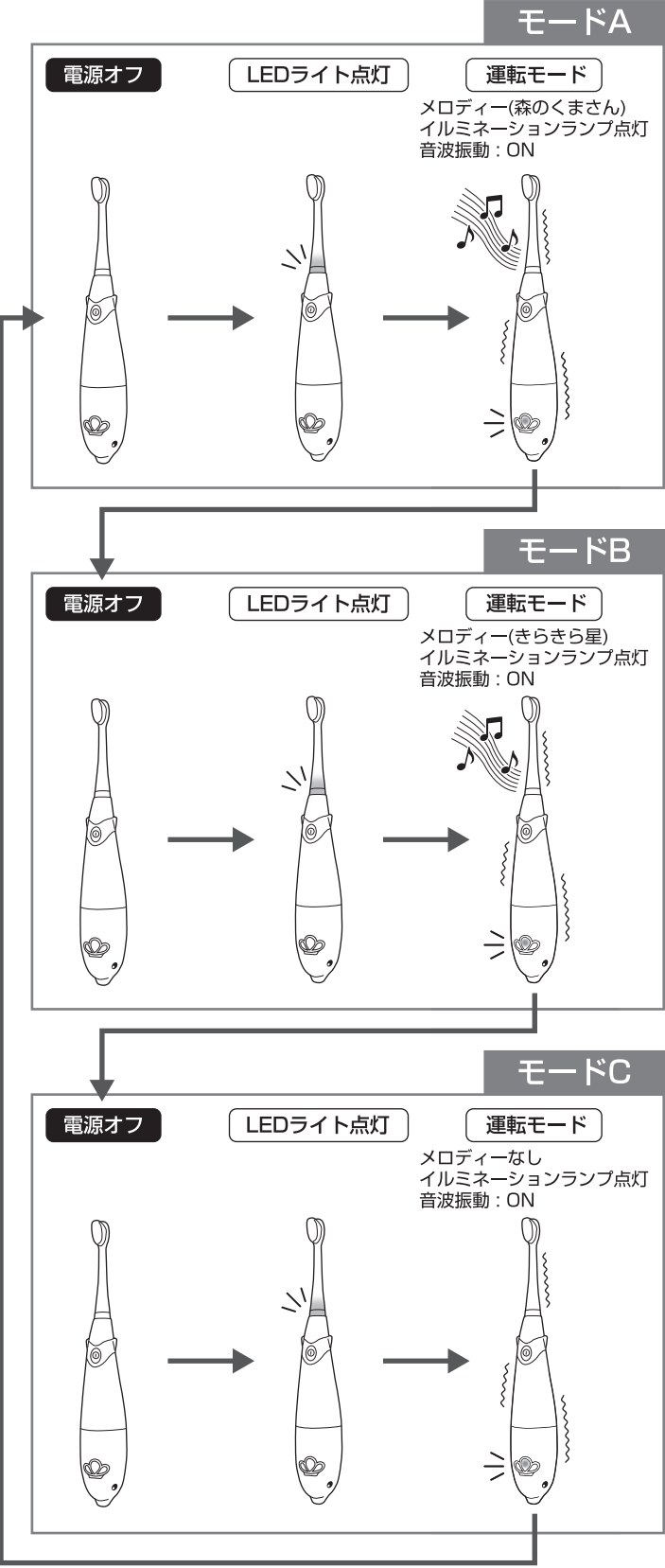

※ オートパワーオフした場合、選択していた各モードの電源オフに戻ります。
(オートパワーオフ: LEDライト 約30秒、メロディー・音波振動 約2分)

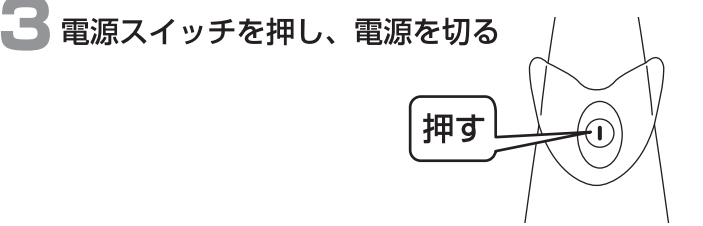

30秒お知らせ機能


電源を入れてから、30秒ごと(30秒、60秒、90秒)に約0.5秒振動が止まり、経過時間をお知らせします。約2分経過するとオートパワーオフ機能により電源が切れます。
お知らせを目安に歯を均等にブラッシングすることで、歯垢を効果的に落とすことができます。

上手な磨き方

ブラシの毛先が歯や歯ぐきに触れるようにやさしくあててください。
ブラシは手磨きのように動かさず、1、2本ずつ横へ移動させながら磨いてください。

● 歯面や噛み合わせ面

歯に対してブラシを90°にあてる

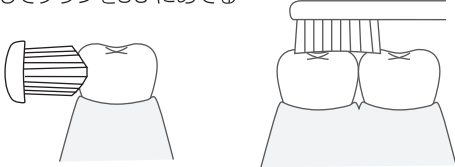


● 歯と歯ぐきの境目

歯に対してブラシを斜め(45°)にあてる



● 前歯の裏や歯並びの悪いところ

ブラシを縦にあて、1本ずつ磨く

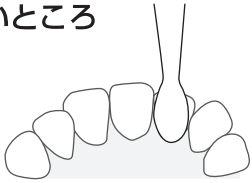


● LEDライトで口の中を照らして、仕上げ磨きをしましょう

使い終わったら

● ブラシ部を水で洗う

流水でハミガキ剤を落とし、水気をよく切ってください。

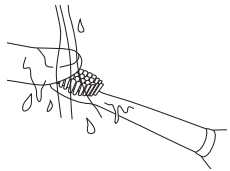


※電池カバーがゆるんでいたたり、はずれた状態で
ブラシ部を洗わないでください。本体内部に水
が入る恐れがあります。

● コップなどに立てて、風通しの良い場所に保管してください。

ブラシの交換時期

約3ヶ月を目安として交換することをおすすめします。
また、3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換の時期です。

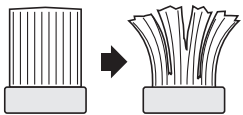


※交換用ブラシのご購入について
は、お買い上げの販売店へお問
い合わせください。

お手入れについて

●ハミガキ剤などで、ブラシが固まり
抜けにくくなったら、40℃以下の
ぬるま湯にしばらく浸けてからはず
してください。(右図参照)

※長時間、水に浸けないでください。
故障の原因になります。

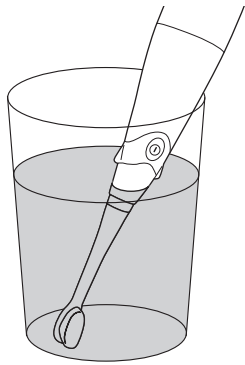

<お願い>

- 本体をお湯に浸けたり、アルコールに浸けたりしないでください。また、
消毒液をつけた布で拭かないでください。
- 汚れを落とす際に、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないで
ください。

保管方法について

<お願い>

下記のところに保管しないでください。

- 浴室など水のかかるところ
- 高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ環境
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

別売品について

※交換用ブラシのご購入については、お買い上げの販売店へお問い合わせ
ください。

エッジブラシ
(2本入)
品番: KB-308



山切りカットブラシ
(2本入)
品番: KB-309



故障かな?と思ったら

※次の点をチェックしましょう

こんなときは	原 因	対 策
動かない 振動が遅い	電池が少ない	電池を交換してください →電池の入れ方
ブラシの動作が おかしい (ガタつくなど)	正しくブラシが取り 付けられていない	ブラシを正しく取り付けて ください →ブラシの取り付け方
ブラシの 威力が弱い	電池が少ない	電池を交換してください →電池の入れ方
	ブラシを強く当てて 磨いている	上手な磨き方を参照して ください
使用中、 一瞬ブラシの 動きが止まる	30 秒お知らせ機能により、30 秒ごとに約 0.5 秒 振動が止まり、経過時間をお知らせます。	

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また火中に
投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着
した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水
で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込ん
だ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁
してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因にな
ります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。
電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の
故障、けがの原因となります。
※ 電池の極性(+)・(-)を正しく入れてください。
※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

製品仕様

品 番	TB-311
品 名	メロディー付音波式電動歯ブラシ
寸 法	本体 / 約 Φ30×190mm
重 量	本体 / 約42g
メ ロ デ ィ ー	森のくまさん、きらきら星
オートパワーオフ	LEDライト / 約30秒 メロディー・音波振動 / 約2分
振 動 数	約18,000回以上／分(無負荷時)
動 作 温 湿 度	0～50℃、85%RH以下(ただし、結露しないこと)
防 滴 性 能	IPX4
使 用 電 池	単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
電 池 寿 命	約2ヶ月(1回2分、1日2回使用した場合、 室温23℃、アルカリ乾電池使用)
毛 の か た さ	エッジブラシ: やわらかめ 山切りカットブラシ: やわらかめ
付 属 品	取扱説明書(保証書付)、 エッジブラシ×1本(KB-308)、 山切りカットブラシ×1本(KB-309)

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますので
ご了承ください。