


充電式音波電動歯ブラシ

取扱説明書 保証書付

品番 TB-500

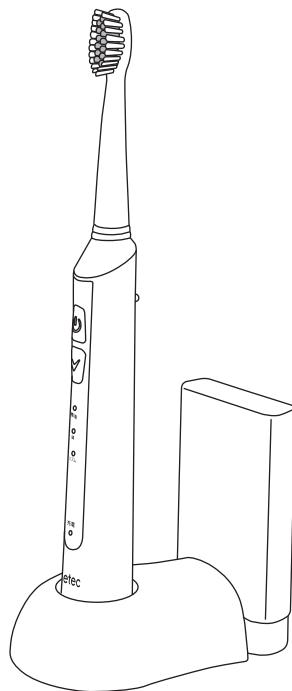

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	1～2	お手入れ・保管について	7
各部の名称	3	故障かな?と思ったら	8
充電方法	4	アフターサービスについて	9
使用方法	5～6	製品仕様	10
使い終わったら	6	リチウムイオン電池のリサイクル	10

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

安全上のご注意

この取り扱い説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しております。

警告マークの種類	警告マークの内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。

警告

下記の方は使用しないでください。または使用を歯科医師にご相談ください。 口内の感覚が敏感な方／口腔または歯周手術の直後や治療中の方／口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方／歯ぐきから出血が続く、または大量の出血がある方・傷口を悪化させたり、けがの原因になります。	 指示
本体・充電スタンド・ブラシは、乳幼児の手の届かないところに置いてください。 小さいお子様だけでのご使用は避けてください。乳幼児のけがの原因になります。	 禁止
複数の人で併用しないでください。病原菌が感染する原因になります。	
コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100～110V以外でしないでください。火災や感電の原因になります。	
傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。感電やショート、発火の原因になります。傷がついた場合は使用を中止し、お住まいの自治体の指示に従い破棄してください。	 禁止
あおむけやそれに近い姿勢で使用しないでください。ブラシがはずれた場合、のどにつまるおそれがあります。	
本体を廃棄するとき以外は、分解や改造をしないでください。けがや故障の原因になります。	 分解禁止
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電や故障の原因になります。	 ぬれ手禁止
本体および充電スタンドは浴室内など水のかかる場所で使用しないでください。故障の原因になります。	 水ぬれ禁止


⚠ 注意

電源プラグのほこりは拭き取ってください。感電やショート、発火の原因になります。	指示	
電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。感電やショート、発火の原因になります。		
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。電源コードの断線により火災や感電の原因になります。		電源プラグ を抜く
専用の充電スタンド以外は使用しないでください。発火や火災、感電、故障の原因になります。		
1週間以上ご使用にならない場合は、電源プラグを抜いてください。感電や火災の原因になります。		禁止
充電スタンドのお手入れの際は、電源プラグを抜いてください。感電やけがの原因になります。		
本体を火の中に入れないでください。破損してけがなどの原因になります。		禁止
自分で意思表示ができない方は使用しないでください。また、小さいお子様や体の不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必ずまわりの方が気をつけてあげてください。事故やトラブルの原因になります。		
歯や歯ぐきにブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分を当てないでください。また、長時間同じ箇所を磨かないでください。歯や歯ぐきに損傷を与えることなく、安全に使用してください。		禁止
ご使用中に体調が悪くなった場合は、使用を中止してください。また、違和感を感じる場合は、歯科医にご相談の上、ご使用ください。		
人以外に使用しないでください。また、歯磨きや歯ぐきのブラッシング以外には、使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。		禁止
電源を入れたまま放置しないでください。漏液、発熱、破裂などを起こし本体が破損する原因になります。		
ブラシが本体にしっかりと固定されていない状態で使用しないでください。事故や故障の原因になります。		禁止
ブラシを口に入れたまま手を離さないでください。ブラシ部がはずれる場合があります。		
研磨剤が多く含まれるハミガキ剤(やに取り用・美白用など)は使用しないでください。歯や歯ぐきを痛める原因になります。		

各部の名称

は保証対象部分です

本体

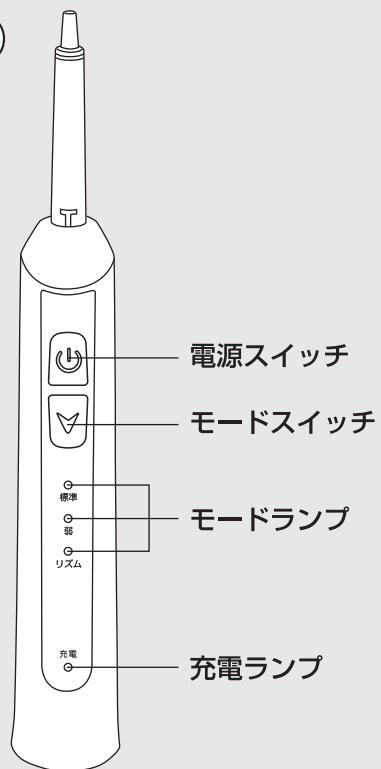

替えブラシ

エッジブラシ

エッジが歯の
汚れを除去し
ます。



微細毛ブラシ

極細毛で歯周
ポケットの汚れ
をかき出します。



充電スタンド

ブラシ差し込み口

本体差し込み口

電源コード

電源プラグ


カバー

充電方法

はじめて使用するときや使用中に停止したときには、必ず充電してください。

※充電中に本体と充電器があたたかくなることがあります、異常ではありません。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

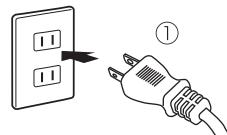

2 本体を充電スタンドに差し込む


充電ランプが赤色に点灯して充電が開始されます。
ランプが消灯すると充電完了です。

●充電時間は約10時間です。

(本体が動かない状態からの満充電の場合)

※充電時間や使用時間は電池温度や周囲温度などの状況により変わります。

●コードは充電スタンド後ろの切り込みに入れて、安定した状態で設置してください。

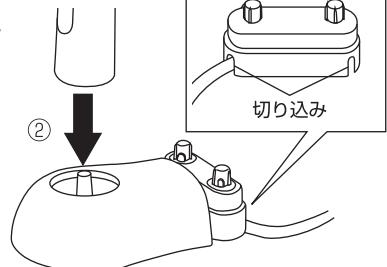

<充電中>

ランプが赤色
に点灯します



<充電完了>

ランプが消灯
します




<電池残量が少ない場合>

ランプが赤色
に点滅します*



※使用後の電源オフ時やオートパワーオフ時にランプが10回点滅します

ブラシの取り付け方

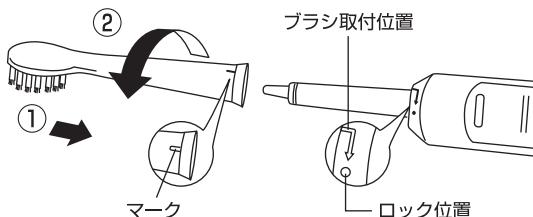

①ブラシにあるマークと本体背面にあるブラシ取り付け位置を合わせます。


②ブラシを矢印の方向に回し、固定します。

※取りはずすときは、②矢印の逆方向に回してから抜いてください。

ブラシの交換時期

約3ヶ月を目安として交換することをおすすめします。

また、3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換の時期です。

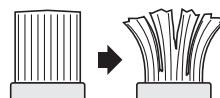

※交換用ブラシのご購入については、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

使用方法

1 口の中にブラシを入れる

※ハミガキ剤は適量をつけてください。




本体の動きに任せて歯を磨いてください。
力を入れて押したり、こすったりすると、
故障の原因になります。



2 電源スイッチを押す

電源スイッチを押すとブラシが振動します。
上手な磨き方(6ページ)を参照して歯を磨いてください。

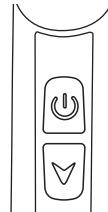

●モードの切り替え

モードスイッチを押すとモードを切り替えることができます。

モードは標準・弱・リズムモードの順に切り替わります。

※選択しているモードはモードランプでわかります。

※モードを選択してから電源スイッチを押して開始することも
できます。

※モードスイッチを押さずに電源スイッチを押すと、前回使用
したモードから開始されます。

モード：標準


- 標準
- 弱
- リズム

モード：弱

- 標準
- 弱
- リズム

モード：リズム

(標準・弱の繰り返し)

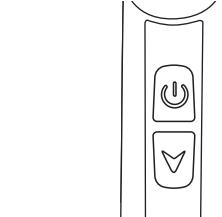

3 電源スイッチを押し、電源を切る

口の中にブラシを入れたまま電源スイッチを押して電源を
切ってください。



30秒お知らせ機能

電源を入れてから、30秒ごと(30秒、60秒、90秒)に短い振動で経過時間をお知らせします。2分経過すると電源が切れます。お知らせを目安に歯を均等にブラッシングすることで、歯垢を効果的に落とすことができます。※モードを切り替ても、30秒お知らせ機能は引き続きカウントされます。


上手な磨き方

ブラシの毛先が歯や歯ぐきに触れるようにやさしくあててください。

ブラシは手磨きのように動かさず、1、2本ずつ横へ移動させながら磨いてください。

● 歯面や噛み合わせ面

歯に対してブラシを90°にあてる

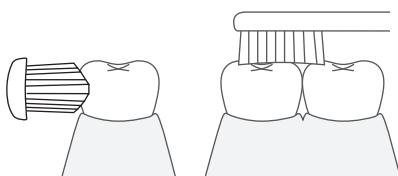

● 歯と歯ぐきの境目

歯に対してブラシを斜め(45°)にあてる



● 前歯の裏や歯並びの悪いところ

ブラシを縦にあて、1本ずつ磨く




使い終わったら

1 ブラシ部を水で洗う


使用後はブラシ部を水洗いしてください。

※流水でハミガキ剤を落とし、水気をよく切った後、風通しの良い場所に保管してください。

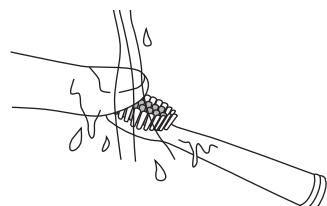


2 本体を充電スタンドに差し込む

乾いたやわらかい布で本体の水気をよく拭き取ってから、充電スタンドに差し込んでください。

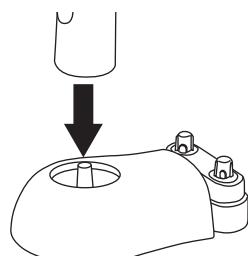


お手入れについて

- ハミガキ剤などで、ブラシが固まり抜けにくくなったら、40°C以下のぬるま湯にしばらく浸けてからはずしてください。(右図参照)
※長時間、水につけないでください。故障の原因になります。
- 充電スタンドは水洗いして(右図参照)、乾いたやわらかい布で水気をよく拭き取ってください。
※電源コードやプラグに水がかからないようにしてください。
故障の原因になります。

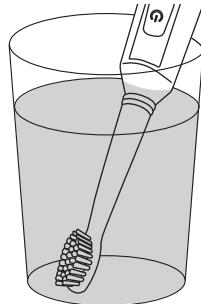


<お願い>

- 充電スタンドをお手入れするときは必ず電源プラグを抜いてください。
- 本体を40°C以上のお湯に浸けたり、アルコールに浸けたりしないでください。また、消毒液をつけた布で拭かないでください。
- 汚れを落とす際に、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。

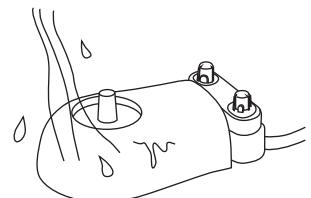

保管方法について

- ①ブラシを本体から取りはずし、本体を充電スタンドの本体差し込み口に差し込んでください。
- ②ブラシ差し込み口に、ブラシの向きが内側に向かい合うように差し込んでください。
- ③カバーを取り付けてください。

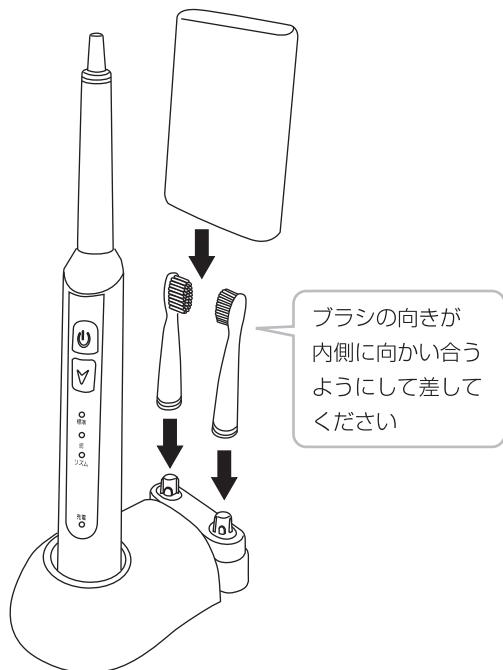

<お願い>

- 下記のところに保管しないでください。
- 浴槽など水のかかるところ
 - 高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ環境
 - 傾斜、振動、衝撃のあるところ
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

故障かな？と思ったら

※次の点をチェックしましょう

こんなときは	原 因	対 策
動かない ブラシの振動が遅い	充電残量が少ない	充電してください →4 ページ
ブラシの動作が おかしい (ガタつくなど)	正しくブラシが取り付けられて いない	ブラシを正しく取り付けて ください →4 ページ
ブラシの威力が弱い	充電残量が少ない	充電してください →4 ページ
	ブラシを強く当てて磨いている	上手な磨き方を参照して ください→6 ページ
使用中、一瞬ブラシの 動きが止まる	30 秒お知らせ機能により、30 秒ごとに短い振動で経過時間をお知らせます。→6 ページ	
充電しても使用時間 が短い	充電時間が短い	充電してください →4 ページ
	充電池の寿命（交換できません）	廃棄してください →10 ページ
充電スタンドに差し ても充電ランプが 点灯しない	電源プラグがコンセントに差し 込まれていない	正しく差し込んでください →4 ページ
	充電スタンドに本体が正しく差 し込まれていない	正しく差し込んでください →4 ページ
	充電が完了している	満充電になるとランプが消え ます
本体を充電スタンドか らはずしても充電ラン プが消えない	当社のお客様相談センターまでお問い合わせください →9 ページ	
充電時間を超えても 充電ランプが消えない		

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間 保証対象：本体、充電スタンド

- 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理について

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて頂きます。

- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません。

修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

問い合わせ先

- ご不明な場合は、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター  0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

別売品について

※交換用ブラシのご購入については、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

エッジブラシ

品番：KB-306



微細毛ブラシ

品番：KB-307



製品仕様

品番(品名)	TB-500(充電式音波電動歯ブラシ)
寸法	本体 / 228×Φ30mm 充電スタンド / 112×68×110mm
重量	本体 / 約62g 充電スタンド / 約200g
コード長さ	約1.2m
消費電流	約1.0W以下
振動数	約34,000回以上/分(無負荷時、標準モード) 約28,000回以上/分(無負荷時、弱モード)
動作温度	5~40°C
防滴性能	IPX7
オートパワーオフ	約2分
電源	AC100V 50/60Hz 約1.4W以下
内蔵電池	リチウムイオン電池
使用時間	約90分(室温23°C、満充電の場合)
充電時間	約10時間(本体が動かない状態から満充電まで)
毛のかたさ	エッジブラシ:やわらかめ 微細毛ブラシ:やわらかめ
付属品	取扱説明書(保証書付)、エッジブラシ、微細毛ブラシ、充電スタンド、カバー

*製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。


リチウムイオン電池のリサイクル



Li-ion 00


リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み商品を廃棄する際は、リサイクルにご協力ください。リサイクルに関しては各自治体の指示に従ってください。

1 ※必ず動作しなくなることを確認してから行ってください。

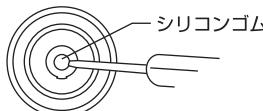


本体底のシリコン部をマイナスドライバーで削り取ってください。

2

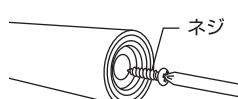


プラスドライバーでネジをはずしてください。

3

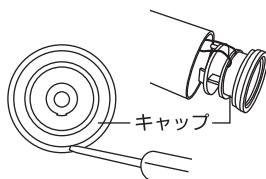


マイナスドライバーでキャップ部を引っかけて取りはずしてください。※固いのだけがに気をつけてはずしてください。

4

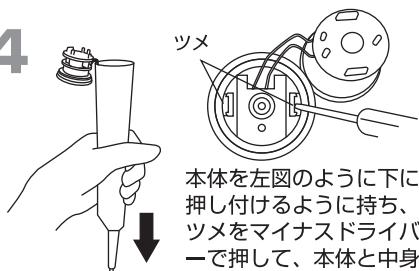

本体を左図のように下に押し付けるように持ち、ツメをマイナスドライバーで押して、本体と中身をはずします。

5

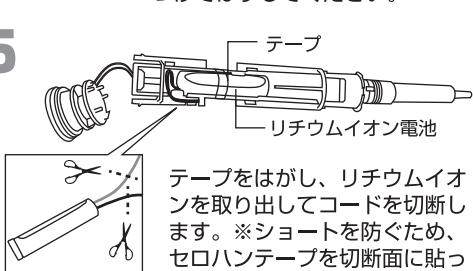

テープをはがし、リチウムイオンを取り出してコードを切断します。※ショートを防ぐため、セロハンテープを切断面に貼つてから廃棄してください。

10

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品 番	TB-500		
保証期間	対 象 部 品	お買い上げ日より	保 証 条 件
	本体、充電スタンド	1年間	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前 ご住所 お電話		
販 売 店	販売店名 ご住所 お電話		

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えた場合。
 - ※本保証書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定める場合を除き、事前の同意をいただにくどなく、上記目的以外には使用いたしません。

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター



0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10：00～12：00, 13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く)